



- снимает напряжение
- устраняет усталость
- улучшает самочувствие
- восстанавливает силы

PILOT

массажная накидка

руководство пользователя

R
U
S

E
N
G

US MEDICA

Профессиональное массажное оборудование

Ознакомьтесь с продукцией компании **US MEDICA** можно на сайтах www.us-medica.ru и www.us-medica.com

По всем возникающим вопросам и предложениям пишите нам на info@us-medica.ru



«Эффект массажа — естественная
восстанавливающая сила организма, сила жизни.»

Гиппократ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с покупкой массажной накидки **US MEDICA PILOT!**

Все изделия компании **US MEDICA** соответствуют самым высоким мировым стандартам качества и произведены под контролем специалистов в области медицины и массажного оборудования. Наша продукция предоставляет Вам высокий уровень комфорта в использовании и максимальный расслабляющий эффект.

Наша продукция позволит Вам надолго сохранить молодость, здоровье и активность.

us-medica.ru

R
U
S

СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые особенности.....	5
Меры предосторожности.....	6
Использование.....	8
Описание режимов работы.....	10
Устранение неполадок.....	12
Хранение и уход.....	13
Технические характеристики.....	13

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вибрационный массаж спины, бедер и ягодиц
- Опциональная функция прогрева сиденья
- Подходит для использования в автомобиле, дома и офисе
- 8 установленных программ вибромассажа
- 6 массажных вибромоторов
- Удобный пульт управления
- Работа от сети переменного тока 220 В или прикуривателя автомобиля 12 В

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

- Сохранность и эффективное использование массажной накидки возможны только в случае ее применения исключительно по назначению.
 - Перед первым использованием осмотрите накидку и убедитесь в отсутствии повреждений.
 - До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажную накидку. Во время массажа следите за своим самочувствием.
 - Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться накидкой без присмотра со стороны.
 - Массажная накидка должна быть установлена вертикально на стуле или кресле; не используйте накидку в горизонтальном положении — под весом тела возможно повреждение устройства.
 - Не вставайте на накидку ногами и не помещайте на нее тяжелые предметы.
 - Не используйте накидку в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
 - Не используйте накидку вблизи раскаленных предметов.
 - Ни в коем случае не используйте накидку при видимых повреждениях шнура или вилки!
 - Для массажа используйте удобную одежду, не стесняющую движений.
 - Максимальный вес пользователя — 110 кг.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.
 - Запрещено касаться накидки влажными руками!
 - Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
 - При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование!
 - Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
 - При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа, немедленно прекратите использование накидки и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
 - Массажная накидка не предназначена для терапевтических или лечебных целей.
 - Запрещено погружать накидку в воду или другие жидкости во время ее очистки.
 - Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки устройства.
 - Не рекомендуется пользоваться массажной накидкой во время движения автомобиля.
 - Подключайте массажную накидку к прикуривателю автомобиля только после того, как заведете двигатель, чтобы не повредить электрику автомобиля, так как для использования функции прогрева требуется значительное количество энергии.

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

ВНИМАНИЕ!

- **Не** используйте массажную накидку, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- **Не** используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
- **Не** просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажной накидки.
- **Не** используйте массажную накидку в помещениях, где распыляются аэрозольные препараты.
- **Не** тяните массажную накидку за шнур питания.
- **Не** садитесь на массажную накидку с обнаженным торсом и ногами.
- **Не** накрывайте чем-либо массажную накидку в процессе работы.
- **Не** используйте массажную накидку дольше, чем 30 минут за один сеанс во избежание ее перегрева.
- **Не** используйте массажную накидку в качестве замены лечению.
- **Не** используйте массажную накидку перед сном, так как массаж оказывает бодрящее воздействие.


Противопоказания к использованию:

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- большим, проходящим курс лечения после травм и других повреждений;
- при заболеваниях остеопорозом;
- при острых заболеваниях;
- при внезапной острой боли;
- при высоком давлении;
- при заболеваниях сердца;
- при заболеваниях сосудов;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии злокачественных опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- при высокой температуре;
- детям до 12 лет, в период формирования костно-мышечной системы.



Перед применением
проконсультируйтесь
со специалистом!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

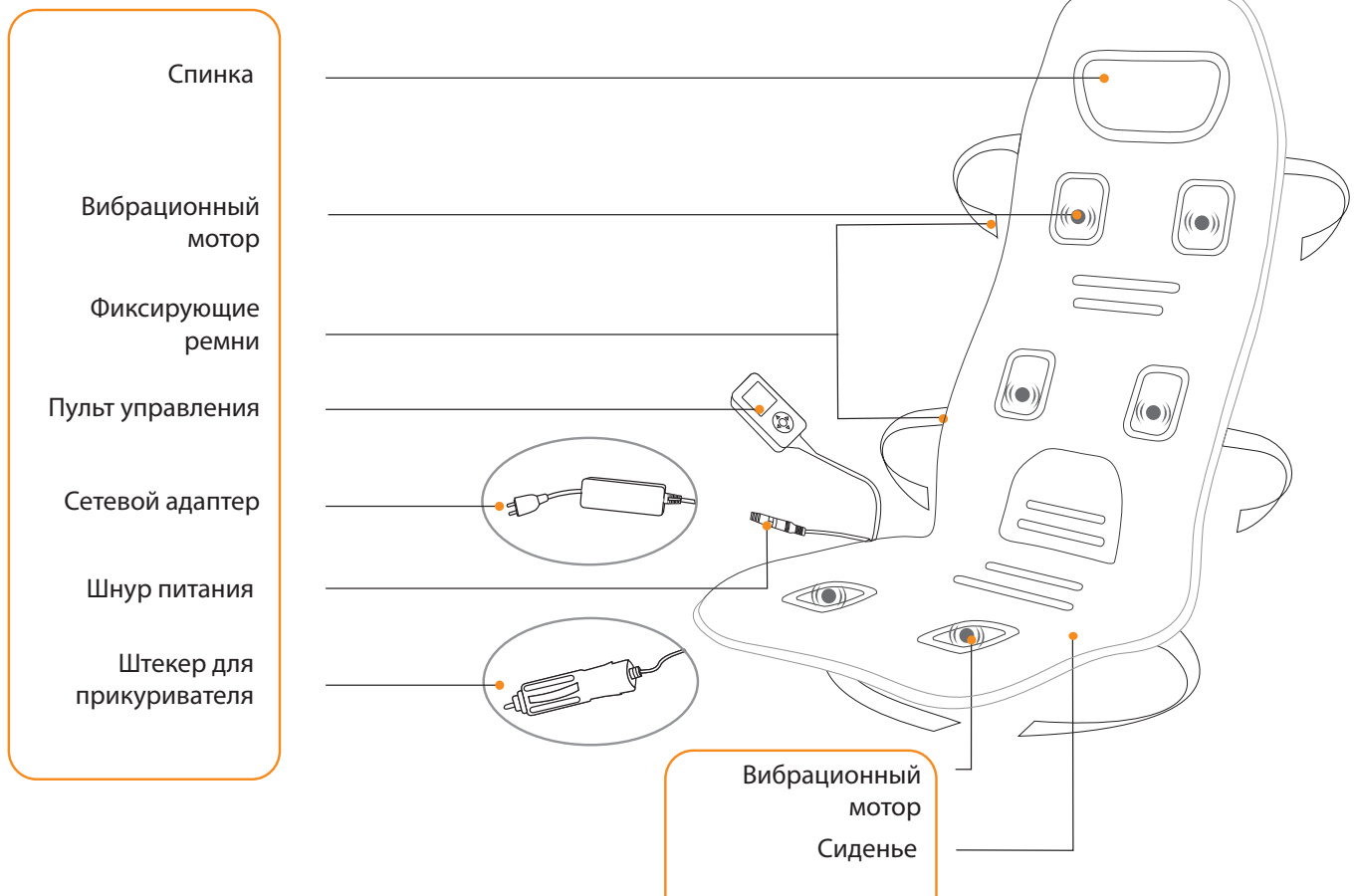

В АВТОМОБИЛЕ

ДОМА

Закрепите накидку при помощи фиксирующих ремней.


Подсоедините шнур питания массажной накидки к штекеру для прикуривателя. Подключайте массажную накидку к прикуривателю автомобиля только после того, как заведете двигатель, чтобы не повредить электрику автомобиля, т. к. для использования функции прогрева требуется значительное количество энергии.





Подсоедините шнур питания массажной накидки к сетевому адаптеру.
Подключите адаптер к сети переменного тока 220 В.

Нажмите кнопку **On** на пульте управления для включения накидки.
Повторно нажимайте кнопку **Mode** на пульте управления для выбора одной из восьми установленных программ вибромассажа.
После завершения массажа нажмите кнопку **Off** на пульте управления для выключения накидки.
Отсоедините шнур от источника питания.

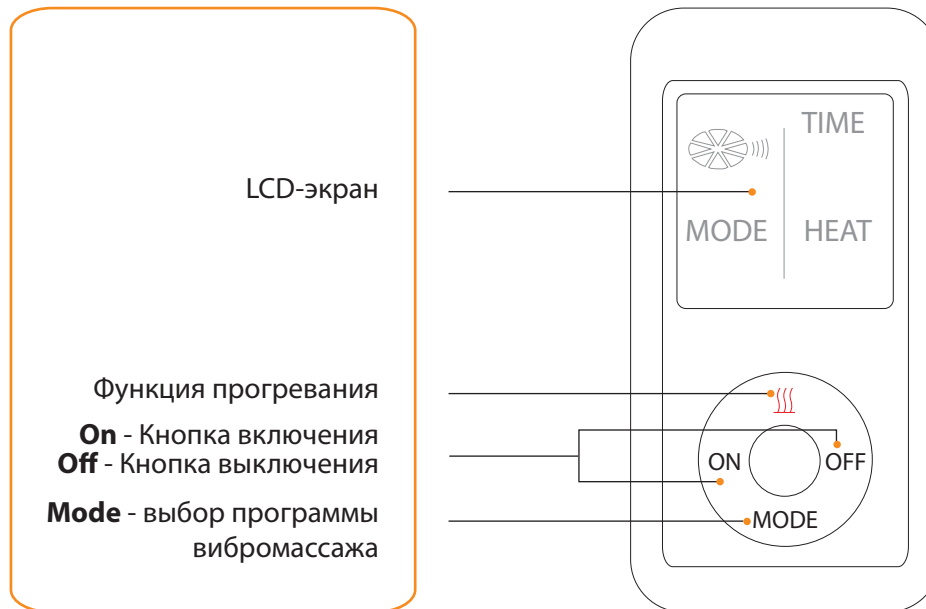
ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Пульт управления



РЕЖИМ	ОПИСАНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА
<p>VIBRATION</p> 	<p>Повторно нажимайте кнопку Mode на пульте управления для выбора одной из восьми установленных программ вибромассажа. Программы отличаются интенсивностью массажного воздействия, зоной охвата массажа и массажным ритмическим рисунком. Каждое нажатие кнопки Mode переключает программу массажа на следующую. Номер выбранной программы массажа будет отображаться на LCD-экране. Таймер начнет обратный отсчет времени, заданное время массажа — 30 минут. Оставшееся время массажа также отображается на LCD-экране. По истечении 30 минут аппарат выключается автоматически.</p>	<p>Снятие напряжения и боли в мышцах. Улучшение циркуляции крови. Тонизирующее воздействие на организм, нормализация биологических процессов и восстановление питания тканей. Положительное психофизиологическое воздействие. Улучшение работы органов дыхания, выведение токсинов и шлаков из организма.</p>
<p>ПРОГРЕВ</p> 	<p>Для включения функции прогрева нажмите кнопку  на пульте управления. Вы почувствуете, что массажная накидка стала излучать тепло. Включение или выключение функции прогрева не влияет на обратный отсчет времени массажа, отображаемый на дисплее пульта управления. Для отключения функции повторно нажмите кнопку . Вы можете использовать функцию прогрева как самостоятельно, так и в совокупности с режимом вибрации.</p>	<p>Снятие боли в мышцах, успокаивание нервной системы.</p>

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Аппарат не работает	Нет подачи электричества	Необходимо восстановить подачу электричества
	Не подключен адаптер	Подключите адаптер согласно схеме на стр. 8
	Аппарат не включен	Включите аппарат, нажав на кнопку On на пульте управления (стр. 10)
	Аппарат перегрелся или сломан	Дайте аппарату остыть некоторое время прежде чем вновь его включать. Если аппарат не включается, обратитесь в сервисный центр
Функция прогрева не работает	Функция прогрева не включена	Нажмите кнопку  на пульте управления для включения функции прогрева
Внезапное прекращение работы	Прекратилась подача электричества	Необходимо восстановить подачу электричества
	Отсоединился шнур питания	Подсоедините шнур питания

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Хранение

- Поместите аппарат в упаковку.
- Храните накидку в безопасном сухом и прохладном месте.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань накидки.
- Во избежание повреждения не наматывайте шнур питания вокруг накидки.
- Не подвешивайте накидку за шнур пульта управления.

Очистка

- Прежде чем начать чистить изделие, отключите его от сети и дайте ему остыть.
- Очищайте изделие мягкой, слегка влажной губкой.
- Во время чистки изделия не погружайте накидку в воду или в другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Массажная накидка
Модель	PILOT
Напряжение	Вход: 220 В, 12 В
Мощность	12 Вт
Адаптеры для использования дома и в автомобиле в комплекте	