



TOUCHBeauty

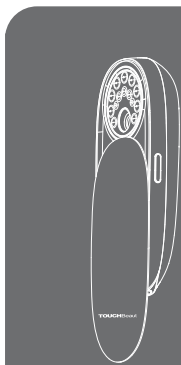

ПРИБОР ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ

AS-1185
ИНСТРУКЦИЯ

УСТРОЙСТВО:

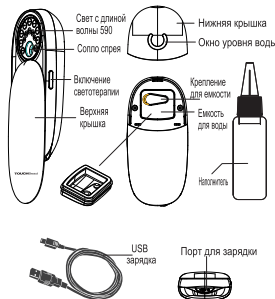

ОСОБЕННОСТИ:

1. Усовершенствованный эффект увлажнения кожи с nano распылением всего за 30 секунд.
2. Свет с длиной волны 590 нм способствует развитию и росту коллагена и эластина, а также разложению меланина. Это может улучшить гибкость и текстуру кожи, сохранить цвет, и молодость кожи.
3. Автоотключение через 30 сек, легко и просто.
4. Аккумуляторные батареи с USB зарядкой.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Этот прибор подходит для всех лиц, особенно для тех, кто часто путешествует и для офисных работников.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• Как активировать устройство:

1. В общей сложности 5 часов необходимо для зарядки устройства. Прибор может непрерывно работать в течение 3 часов после полной подзарядки.
2. Вставьте провод USB в порт USB на приборе и подключитесь к компьютеру.
3. Индикатор становится красным, когда идет подзарядка, и становится зеленым, когда прибор полностью заряжен.

• Как пользоваться:



1. Заполните контейнер очищенной водой или разбавленным тонизирующим лосьоном.
2. Снимите крышку резервуара для воды и заполните жидкостью емкость для воды.
3. Снимите верхнюю крышку, раздвинув звук "Бип". Сработает струя - ледок обласо распыления паров. Держите струю на расстоянии 5-10см от лица. 30 секунд спустя, распыление остановится и опять раздастся звук "Бип".
4. Во время распыления, нажмите кнопку ВКЛ света, чтобы перейти от распыления в режим фототерапии. Избегайте контакта с глазами. Держите прибор вверх вниз на расстоянии 3 см от лица. Нажмите дважды, чтобы исполнить функцию фототерапии или подождите 30 секунд автоматического отключения. Используйте функцию фототерапии два раза в день по 1 минуте для омоложения кожи. Используйте фототерапию совместно с распылителем для лучшего ухода за кожей.

• Как чистить:



1. Чистите прибор с влажной / сухой тканью или салфеткой после каждого использования, чтобы удалить капли и грязь на продукте.
2. Снимите резервуар для воды, промойте резервуар для воды и наполните.
3. Не мойте прибор под водой.

ВНИМАНИЕ:

1. Пожалуйста, прекратите использовать этот устройство, если есть воспаления, ожоги или тяжелые угри на коже.
2. Тоники и масла не рекомендуются использовать в этом устройстве.
3. Пожалуйста, выньте оставшуюся воду из емкости для воды, если прибор не может работать должным образом.
4. Не допускайте, чтобы устройство располагалось горизонтально во время распыления для правильного функционирования.
5. Держите резервуар для воды сухим, если прибор не используется в течение длительного времени.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Характер	Причина	Метод устранения
Устройство не работает	Отсутствие зарядки	Перезарядите устройство
	Низкий заряд	Удалите воду
Спрей работает слабо	Застой воды в сопле	Удалите воду
	Нет воды в резервуаре, нет распыления	Проверьте воду через окно на задней панели.
	Тонизированный лосьон не разбавлен достаточно	Очистите резервуар для воды и заправьте разбавленным раствором
	Засорение сопла	Прочистите отверстие и заново налейте воды.
Отверстие сопла засорено и следствие не использования прибора в течение длительного периода	Отверстие сопла засорено и следствие не использования прибора в течение длительного периода	Прочистите отверстие чистой тканью

Эффект не очевидный	Прибор держите слишком близко от кожи при использовании. Спрей сверзывается в капли воды, которые могут не поглотиться кожей из-за своих крупных размеров	При распылении держите прибор от 5 до 10 см от кожи
	Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.	

СОВЕТЫ:

Специальные преимущества увлажнения кожи:

Дом	Увлажнение кожи после умывания лица
	Используйте свет 590 нм для фототерапии после применения по уходу за кожей, чтобы сделать вашу кожу более молодой.
Путешествия	Используйте в самолете, где достаточно сухой воздух
	При быстрой смене погоды, особенно важно для чувствительной кожи глубокое увлажнение. Увлажнение кожи необходимо, чтобы чувствовать себя лучше после пребывания на солнце и обильной потливости. Фототерапия поможет вам восстановить тонус кожи, отбелит и защитит кожу.
Работа	Увлажнение кожи необходимо в сухих помещениях с кондиционером.
	После дремоты в полдень, свежий туман поможет вам проснуться. Периодически освежайте ваш мейк-ап и причёску.

ПРИБОР ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ
Модель: AS-1185
Material: ABS Stainless steel, Glass
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 516133

AS-1185-003

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	300*100mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑单面	型号	AS-1185	日期	2014-2-27
其它	风琴5折后 (50*100mm) 成品		单位	设计	周苏辉
			毫米		