

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
АВТОМОБИЛЬНОЙ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ  
PLANTA**

**MNA-100B**



**PLANTA**

[www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

## **ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

### **Использование автомобильной массажной накидки**

С помощью этой массажной накидки Вы сможете наслаждаться массажем в вашем собственном автомобиле. Компактная и необыкновенно приятная на ощупь вибрационная накидка с функцией прогрева сидения предназначена для целенаправленного массажа основных областей напряженных мышц (бедро, поясница, спина, плечи), для каждой рабочей зоны можно задать тип массажа и его интенсивность.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что этот массажер Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашей массажной накидки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажера.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите сайт: [www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

### **Техника безопасности**

- Данное устройство работает от прикуривателя. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.



- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.

- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.



- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети.

Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.

- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.

- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как: электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

## Предупреждения

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы

- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
- проходите реабилитацию после операции.

- Не используйте прибор, если на ногах имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.

- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.

- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.

- Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

### **Примечания**

- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.

### **Уход**

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

### **Возможные риски**

Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте устройству остыть.

Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.

Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

**Внимание!** Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

### **ВНИМАНИЕ!**

**МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**



## Описание изделия:



Автомобильный адаптер



## Начало использования

Уложите массажную накидку на автомобильное сиденье и закрепите его с помощью фиксирующих ремней, расположенных на задней стороне. Соедините автомобильный адаптер для прикуривателя с кабелем массажной накидки.

Массажное сиденье имеет четыре массажные зоны для целенаправленного массажа. Они находятся в основных областях напряжения мышц (плечи, спина, поясница, бедра). Для каждой зоны массажа можно настроить различные типы массажа с различной интенсивностью.


## Управление массажной накидкой:

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  
Кнопка включения /  
выключения прибора

Кнопка ИНТЕНСИВНОСТЬ  
- регулирование  
интенсивности массажа  
4 уровня. Последовательно  
меняются при каждом нажатии.

Кнопки выбора массажных зон.  
Вы можете выбирать любую  
комбинацию из 4 массажных зон.  
Область плеч (ПЛЕЧИ)  
Область спины (СПИНА)  
Область поясницы (ПОЯСНИЦА)  
Область бедер (БЕДРА)

Кнопка ТАЙМЕР  
Последовательным нажатием выбирается  
время массажа: 15, 30, 60 минут

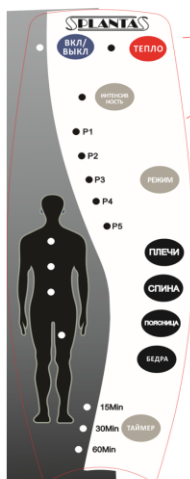

Кнопка ТЕПЛО  
Кнопка включения подогрева сидения  
Кнопка РЕЖИМ  
- выбор режима вибромассажа:  
P1 – Пульсация. Массажные вибромоторы  
пульсируют попеременно.  
P2 – Ударный массаж. Массажные  
вибромоторы создают эффект  
постукивания.  
P3 – Волнообразный массаж. При этом  
виде массажа двигатели переключаются  
таким образом, что при массаже  
возникает чувство «волны».  
P4 – Смешанный режим. В этом режиме  
прибор автоматически проходит  
попеременно все виды массажа.  
P5 – Разминающий массаж. Данный вид  
массажа соответствует примерно эффекту  
массажа «шиацу»

## Функции:

Включение: нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.  
Выключение: нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ повторно.

Установите время действия массажной накидки, нажав последовательно кнопку ТАЙМЕР. При этом будет загораться соответствующий индикатор. Таймер автоматически отключает прибор по истечении выбранного времени 15, 30 или 60 минут.

### ВНИМАНИЕ!

Следите за тем, чтобы не превышать максимальную длительность работы 60 минут!

Для подключения нагрева нажмите кнопку ТЕПЛО. При включенном нагреве горит красный светодиод. Зона СИДЕНИЯ будет подогреваться. Для отключения нагрева повторно нажмите кнопку ТЕПЛО.

### ВНИМАНИЕ!

Вы можете использовать нагрев отдельно или в комбинации с функцией массажа.

Для настройки требуемой интенсивности нажмите кнопку ИНТЕНСИВНОСТЬ. Предусмотрено 4 уровня. Последовательно нажимая кнопку, выберите наиболее подходящую для вас.



Выберите необходимый режим массажа, последовательно нажимая кнопку РЕЖИМ, при этом будут последовательно загораться световые индикаторы, соответствующие выбранному режиму с P1 по P5.

- P1 – Пульсация. Массажные вибромоторы пульсируют попеременно.
- P2 – Ударный массаж. Массажные вибромоторы создают эффект постукивания.
- P3 – Волнообразный массаж. При этом виде массажа двигатели переключаются таким образом, что при массаже возникает чувство «волны».
- P4 – Смешанный режим. В этом режиме прибор автоматически проходит попеременно все виды массажа.
- P5 – Разминающий массаж. Данный вид массажа соответствует примерно эффекту массажа «шиацу».

Вы можете выбирать любую комбинацию из 4 массажных зон.

Область плеч (ПЛЕЧИ)

Область спины (СПИНА)

Область поясницы (ПОЯСНИЦА)

Область бедер (БЕДРА)

Нажатием соответствующей кнопки можно целенаправленно подключить или отключить массажную зону. При активировании массажной зоны загорается соответствующий светодиод.

### **Хранение, перевозка и регулярный осмотр**

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте.
- Прежде чем сложить устройство для хранения, дайте ему полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке массажной накидки.

### **Технические характеристики**

Питание: 12 V === 1A

Мощность: 12W

### **ВНИМАНИЕ!**

**МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**



Условия гарантии	Гарантийный талон
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</li> <li>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</li> <li>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- механических повреждений;</li> <li>- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li> <li>- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li> </ul> </li> <li>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</li> <li>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</li> <li>6. Гарантийный срок – 1 год.</li> <li>7. Срок службы – 3 года.</li> </ol>	<p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:</p> <hr/> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p>