

GÉZATONE

SKY STEPS

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

МОДЕЛЬ AMG718

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
ВАШИХ НОГ!



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GEZATONE



Спасибо за покупку!

Благодарим вас за выбор нашей продукции марки Gezatone и поздравляем вас с удачной покупкой!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации изделия и сохраните ее на будущее!

Массажер для ног Gezatone «SKY STEPS», модель AMG718 - это инновационный прибор, который сочетает в себе функции разминающего массажа, прессотерапии и восстанавливающего массажа Шиацу. Такой интенсивный глубокий массаж благотворно влияет на здоровье всего организма, стимулирует акупунктурные точки, расположенные на подошве, улучшает кровообращение, снимает усталость, улучшает самочувствие и настроение.

- Благодаря **массажу Шиацу** снимается напряжение в мышцах и суставах, восстанавливается нормальное кровоснабжение, стимулируется вывод застоявшейся жидкости.
- Воздействие **роликами** на активные точки стопы производит эффект рефлексотерапии, открывает энергетические каналы,

способствует восстановлению общей работоспособности, снимает дискомфорт и усталость ног.

- **Прессмассаж** - методика воздействия на кожу и подкожные ткани с помощью давления воздуха, которое усиливает приток крови к тканям, помогает снять напряжение мышц, улучшает работу сосудов, превосходно снимает отеки.
- **Тепловое воздействие** улучшает местное кровообращение, стимулирует работу сосудов, устраняет дискомфорт в суставах и мышцах. Используйте массажер Gezatone «Heaven foot», модель AMG715 всего 15 минут в день, и Вы почувствуете улучшение общего самочувствия и настроения!

Преимущества массажера

1. Прессмассаж снимает спазм мышц и усталость ног.
2. Массаж Шиацу воздействует на акупунктурные точки стопы, что дает общий оздоравливающий эффект.
3. Регулярный массаж улучшает самочувствие и настроение.
4. Использование массажера для ног является прекрасной профилактикой варикоза и заболеваний суставов.
5. Прогревание устраняет дискомфорт в мышцах и суставах.
6. Массаж стоп – это идеальный способ расслабиться и снять напряжение после тяжелого дня.
7. Возможность выбрать режим работы и настроить прибор, как это удобно Вам!

Противопоказания

Нельзя использовать массажер для ног:


- Во время беременности.
- Людям с электронными медицинскими устройствами в организме, как, например, кардиостимулятор.
- При туберкулезе.
- При онкологических заболеваниях.
- При флебите или тромбозе вен.
- При диабете.

- При заболеваниях кожи.
- При наличии медицинских искусственных частей ног, имплантатов или винтов внутри.
- При дисфункции суставов, как например, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз.
- При высоком риске развития повышенной свертываемости крови вследствие каких-либо причин.
- При наличии хронических заболеваний, не упомянутых в этом разделе, перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом.
- Необходимо наблюдение ответственного лица при использовании прибора людьми со сниженными физическими или умственными способностями и низкой чувствительностью и детьми моложе 12 лет.



Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим. Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь со специалистом.

Внешний вид

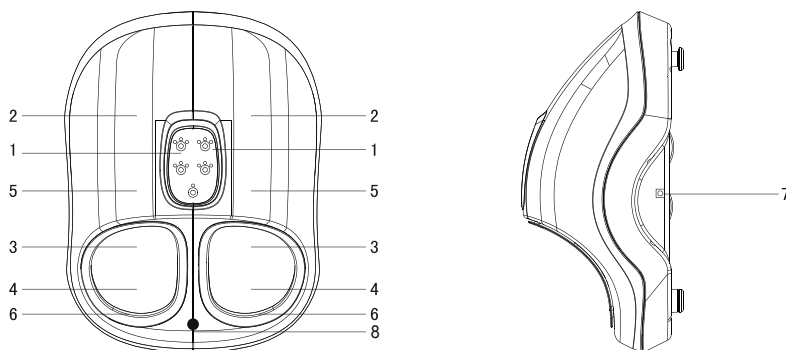

- 1. Панель управления:** управление массажными функциями прибора
- 2. Расположение массажных роликов:** массаж переднего отдела стопы
- 3. Расположение массажных роликов шиацу:** массаж подошвенной дуги
- 4. Расположение роликов для разминающего массажа:** массаж пяток
- 5. Расположение воздушной подушки:** обеспечение массажа воздушным давлением
- 6. Съёмное и моющееся тканевое покрытие**
- 7. Разъём подключения блока питания**
- 8. Кнопка сброса давления**

Панель управления



Кнопка **«Разминающий массаж»**: включение/выключение разминающего массажа в ручном режиме.



Кнопка **«Прессотерапия»**: 3 уровня выбора интенсивности сжатия в ручном режиме.

ВНИМАНИЕ! При возникновении неприятных ощущений при работе прессомассажа нажмите кнопку **«Сброса давления»**



Кнопка **«Авто»**: выбор одного из двух режимов автоматического массажа.



Кнопка **«Нагрев»**: выбор интенсивности нагрева (2 режима) в ручном или автоматическом режимах.



Кнопка **«Питание»**: включение/выключение прибора.



Рекомендации по использованию

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Подключите выходной разъем адаптера к гнезду питания массажера ног, затем подключите адаптер к розетке переменного тока. Раздастся звуковой сигнал, включится светодиодный индикатор. Массажер для ног готов к работе.
- Нажмите кнопку **«Вкл./Выкл.»**, режим по умолчанию **«А»** (автоматический режим) начнет работу (разминающий массаж/прессотерапия, интенсивность воздушного массажа и нагрева находится на первом уровне).
- В режиме **«А»** и **«В»** можно менять интенсивность нагрева, выбирая один из 2-х уровней нажатием кнопки **«Нагрев»**. Третье нажатие выключает прогрев.
- Нажатием кнопки **«Авто»**, можно выбрать один из 2-х режимов:

Режим **«А»**: чередование комбинации прессотерапии и роликового массажа, прессотерапии, роликового массажа.

Режим **«В»**: чередование прессотерапии, роликового массажа, комбинации 2-х видов массажа.

Третье нажатие кнопки **«Авто»** включает ручной режим выбора типа массажа.

- В **«Ручном режиме»** работы также можно менять интенсивность прессотерапии, выбирая один из трех уровней интенсивности (кнопкой **«Прессотерапия»**) индикатор светится зеленым - низкая интенсивность, желтым - средняя, красным - высокая.
- Следующее нажатие кнопки **«Прессотерапия»** выключает этот режим.
- Массажер автоматически отключается через 15 минут (погрешность измерения таймера +/- 2 минуты). При необходимости выключите прибор раньше, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку **«Вкл./Выкл.»**.

Меры предосторожности



- Подключайте массажер к сети переменного тока, соответствующей указанным техническим характеристикам.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра во включенном состоянии.
- Не пользуйтесь массажером под одеялом и не накрывайте чем-либо во время использования (например, подушкой).
- Данный массажер предназначен только для использования внутри помещений.
- Не вставайте и не садитесь на массажер! Запрещается вставать, когда Ваши ступни находятся внутри массажера, даже если массажер выключен!
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в открытые части прибора.
- Ни в коем случае не используйте массажер с поврежденным шнуром или вилкой.
- Не используйте с мокрыми ступнями.
- Не спите во время работы массажера.

Уход и техническое обслуживание

- Всегда отключайте массажер от розетки сразу после использования, а также перед чисткой и техническим обслуживанием.
- Не используйте для чистки разъедающие вещества, такие как бензин, ацетон и прочие растворители.
- Для чистки поверхности массажера пользуйтесь только мягкой сухой тканью.
- Если массажер не используется долгое время, свободно оберните шнур вокруг прибора и заверните его в ткань для защиты от пыли.
- Храните аппарат в чистом сухом месте.
- Не располагайте массажер вблизи предметов, излучающих сильное тепло, таких как нагреватели, печки, а также избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Обращайтесь с массажером аккуратно, избегайте сильного давления и воздействия на корпус и места для постановки ступней.
- В случае возникновения неисправностей обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать массажер!

Возможные неисправности и пути их устранения

Неисправность	Возможная причина	Как ее исправить
Массажер не работает	1. Возможно, блок питания не включен в розетку.	1. Подключите питание.
	2. Плохой контакт в сетевой вилке или шнуре.	2. Проверьте вилку или шнур, при необходимости обратитесь в сервис-центр.
	3. Кнопка «Вкл./Выкл.» не нажата.	3. Нажмите кнопку.
Прибор прекратил воздействие	1. Возможно, нарушился контакт в вилке или шнуре питания.	Убедитесь, что все подключено верно и надёжно.
	2. Время массажа превысило 15 минут.	Выключите прибор, затем включите его снова.

GEZATONE

Технические характеристики

Напряжение питания: AC 220-240 В., 50 Гц. / 12 В., 3 А

Потребляемая мощность: не более 36 Вт

Таймер автоотключения: 15 мин (+/- 2 мин.)

Размеры: 480 мм x 230 мм x 360 мм

Вес: 5,2 кг

Температура хранения: 15-85°C

Диапазон рабочих температур: от +10°C до +40°C при влажности от 0 до 65%

Комплектация

Массажер для ног Gezatone «SKY STEPS», модель AMG718 - 1 шт.

Блок питания - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

GEZATONE -

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
ВАШИХ НОГ!

RUS ver./08.07.2015

